

Università degli studi Milano-Bicocca Dipartimento di Fisica - Laboratorio II Esperienza Ottica - Interferometro

F. Ballo, S. Franceschina, S. Dolci - Gruppo T1 39 June 21, 2024

Abstract

Nella seguente relazione vengono presentati i risultati ottenuti dalla sesta esperienza del corso di Laboratorio II riguardante l'analisi di fenomeni ottici. L'obiettivo di questa esperienza è quello di riprodurre due esperimenti di interferometria: Fabri-Perot e Michelson. Per ciascuno di questi setup riprodotti in laboratorio lo scopo è quello di verificare certe relazioni, che occorrono nel momento in cui raggi luminosi interferiscono tra loro, dalle quali è possibile ricavare informazioni utili come la lunghezza d'onda della sorgente.

Contents

1	Configurazione setup esperienza						
2	Fabry-Perot						
	2.1 Verifica della legge di interferenza						
	2.2 Frange						
	2.3 Conclusioni Fabry-Perot						
3	Michelson						
	3.1 Specchio						
	3.2 Frange						
	3.3 Conclusioni Michelson						
4	Considerazioni sugli errori						
	4.1 Commenti finali						
5	Tabelle						

1 Configurazione setup esperienza

Per le misure di questa esperienza abbiamo utilizzato:

- Un interferometro di precisione PASCO scientific Modello OS-9255A/OS-9258A, link.
- Sorgente: laser monocromatico He-Ne con lunghezza d'onda $\lambda = 632.8\,\mathrm{nm}$.
- Lente divergente: lente da 18mm.
- Specchi compresi nella dotazione PASCO

2 Fabry-Perot

La prima parte dell'esperienza consiste nella verifica della legge che descrive i massimi di interferenza, visibili quando due sorgenti si sommano in fase. Per farlo abbiamo montanto l'interferometro in configurazione Fabry-Perot:

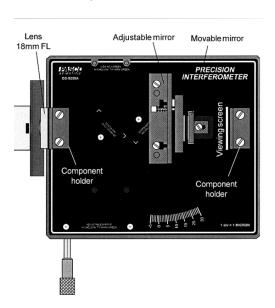


Figure 1: Configurazione Fabry-Perot.

L luce del fascio laser incide contro una lente divergente e entra nella cavità di Fabry-Perot, ovvero due specchi semiriflettenti distanziati d. Le riflessioni successive tra i due specchi formano la figura di interferenza sullo schermo, posto a circa un metro di distanza. È interessante notare come, per ricavare le relazioni che verranno utilizzate per descrivere il fenomeno, si introduca l'ipotesi che i raggi luminosi siano paralleli tra di loro nell'ingresso della cavità, nonostante la presenza di una lente divergente. Abbiamo motivato questa ipotesi osservando che la lente divergente è posta molto vicina alla cavità, e quindi la divergenza dei raggi luminosi è trascurabile. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda i raggi che incidono sullo schermo, essi infatti sono considerati divergenti perchè la distanza tra schermo e specchio è significativa.

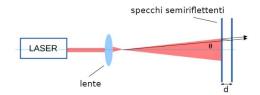


Figure 2: Configurazione Fabry-Perot.

Un'altra osservazione importante riguarda gli angoli delle frange di interferenza. Per l'angolo θ , quello riportato in figura 2,

abbiamo posto il vertice nel fuoco della lente divergente (18mm avanti) e misurato la distanza tra tale fuoco e lo schermo. In questo modo, misurando in seguito la distanza tra il centro della figura di interferenza e la frangia, è possibile calcolare l'angolo θ come l'arcotangente del rapporto tra le due distanze. In ogni caso, tali considerazioni sono state rilevanti solo per questa prima parte dell'esperienza, in cui era richiesto di verificare la legge 1 confrontando i valori di angoli attesi con quelli misurati. Per tutte le altre esperienze abbiamo potuto considerare $\theta \approx 0$ e quindi $\cos(\theta) \approx 1$ poichè lo schermo si trova a una grande distanza dalla sorgente puntiforme.

2.1 Verifica della legge di interferenza

In questa prima parte dell'esperienza abbiamo cercato di verificare la seguente legge di interferenza, che descrive quando i due raggi luminosi interferiscono in fase:

$$\delta_r \frac{\lambda}{2\pi} + 2d\cos(\theta) = N\lambda \tag{1}$$

d è la distanza tra i due specchi, δ_r rappresenta lo sfasamento , θ è l'angolo di incidenza della luce, N è l'ordine di interferenza e λ è la lunghezza d'onda del laser sorgente.

Per verificarla abbiamo deciso di invertire la relazione in modo da evidenzare la dipendenza di $\cos(\theta)$ dalle altre variabili, ricavando la relazione 2:

$$\cos(\theta) = \frac{N\lambda}{2d} - \frac{\delta_r \lambda}{4d\pi} \tag{2}$$

Dopo aver verificato le opportune calibrazioni del laser, delle lenti e dello specchio, abbiamo misurato il diametro dei cerchi di interferenza con un calibro e calcolato così il coseno dell'angolo θ .

La distanza dello schermo dalla sorgente è pari a D=1.375m, assumendo come punto sorgente il fuoco della lente (18mm). Successivamente abbiamo eseguito un'interpolazione tramite la legge 2, mantenendo come parametri liberi δ_r e d.

Abbiamo eseguito tale misura per quattro volte, variando d, al fine di poter verificare in più situazioni la legge.

Riportiamo i grafici ottenuti....

- 2.2 Frange
- 2.3 Conclusioni Fabry-Perot
- 3 Michelson
- 3.1 Specchio
- 3.2 Frange
- 3.3 Conclusioni Michelson
- 4 Considerazioni sugli errori
- 4.1 Commenti finali

5 Tabelle

Gia	Giallo		Ciano		Blu		Viola	
gradi	primi	gradi	primi	gradi	primi	gradi	primi	
48	5	49	33	50	5	51	1	
48	3	49	36	50	8	51	2	
48	1	49	35	50	8	51	0	
48	0	49	33	50	10	51	1	
48	4	49	34	50	4	51	0	
48	2	49	34	50	5	51	0	
48	2	49	31	50	6	51	1	
48	3	49	34	50	7	51	2	
48	6	49	31	50	5	51	1	
48	2	49	32	50	6	51	0	

Table 1: Angoli di minima deviazione per mercurio